




LOCATOR F-Tx™
FIXED ATTACHMENT SYSTEM

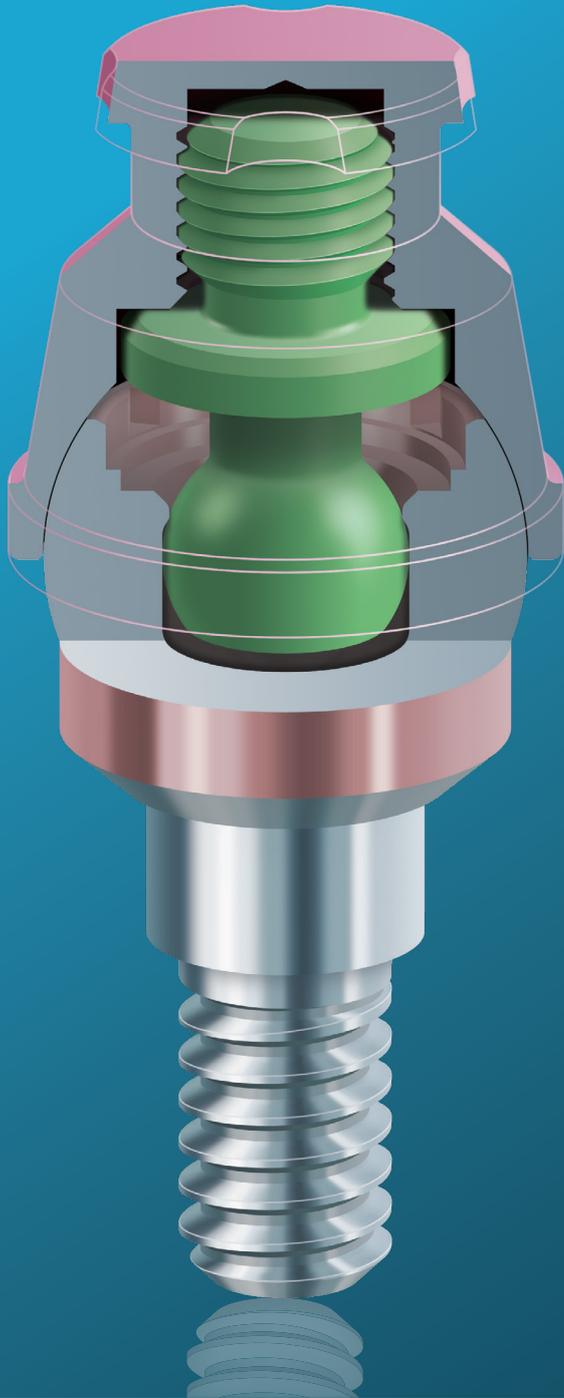

**LA
RESTAURATION
D'UN BRIDGE
COMPLET EN
UN CLIN D'OEIL !**


**SANS VIS,
SANS CIMENT,
SANS AUCUN
COMPROMIS**

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

LE LOCATOR F-Tx™ UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER AUX RESTAURATIONS DES BRIDGES FIXÉS.

LE LOCATOR FTX EST UNE SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE pour restaurer les bridges fixés sans compromettre la tenue et l'esthétique. Optimiser l'efficacité et le temps au fauteuil sont deux éléments qui constituent les principales qualités de ce brevet "snap In". Cet attachement évite l'utilisation du ciment sous gingival ou l'accès aux vis d'implants. Une exceptionnelle solution pour les provisoires, qui donne à ce système des possibilités de restaurations nombreuses, à savoir le tout acrylique ou renforcé avec du métal, PFM ou base zircone. Réellement unique, le locator FTX est sûr de délivrer une satisfaction exceptionnelle tant pour le praticien que pour le patient.

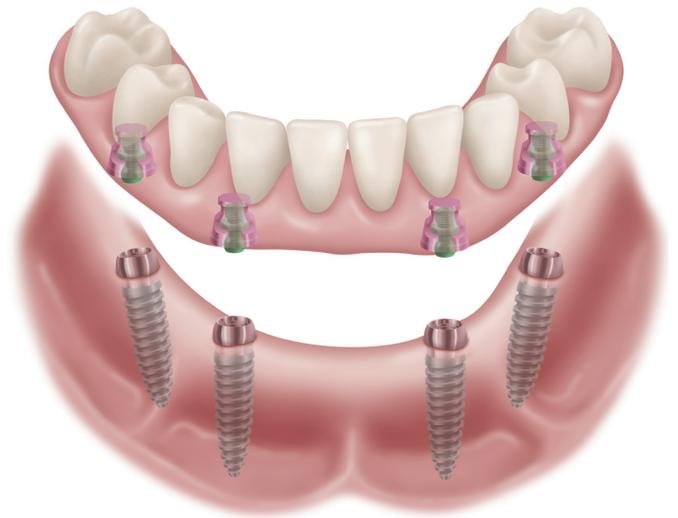

**SCREW RETAINED PROSTHESIS
WITH SCREW ACCESS CHANNELS**



**LOCATOR F-Tx PROSTHESIS
MAINTAINS INTEGRITY AND ESTHETICS**

LA SIMPLICITÉ

Ce concept d'attachement "snap In" est unique car il utilise très peu de composants et ne nécessite pas de longues procédures à mettre en œuvre. Le locator FTX permet de rattraper 40 degrés de convergence ou de divergence entre deux implants sans avoir besoin de piliers angulés.

FORCE ET ESTHÉTIQUE

Pas de cylindre, ni d'accès aux vis afin de ne pas compromettre l'esthétique et la fragilité de la prothèse. Chaque boîtier d'attachement est capable de pivoter jusqu'à 20 degrés dans toutes les directions et permet de se positionner idéalement.

GAIN DE TEMPS

Le gain de temps de fabrication des structures provisoires est significatif par rapport aux méthodes traditionnelles. Le nombre de visites des patients est limité car ce système simple vous permet d'enlever facilement la prothèse lors de vos visites de maintenance.



LOCATOR F-Tx™
FIXED ATTACHMENT SYSTEM

**Et si vous n'aviez plus besoin de vis
ni de ciment pour solidariser
votre prothèse fixée sur implants ?**

**Et si vous pouviez réduire
et simplifier votre temps
de traitement ?**

**Et si vos patients y gagnaient
en confort et en esthétique ?**


Toutes ces questions nous ont amené à concevoir ce produit unique qu'est le **LOCATOR F-Tx™**. Son développement a nécessité de nombreuses années d'expertise au sein de ZEST Dental Solutions et répond totalement aux besoins des patients édentés. Nous avons créé un produit simple et très efficace pour les restaurations de prothèse complète fixée sur implants.

Fixe pour le patient - facile à enlever pour le dentiste

LOCATOR F-Tx - Sans vis, sans ciment, sans aucun compromis.

INTRODUCTION DU LOCATOR F-TX™.

LA PREMIÈRE RÉHABILITATION D'UN BRIDGE

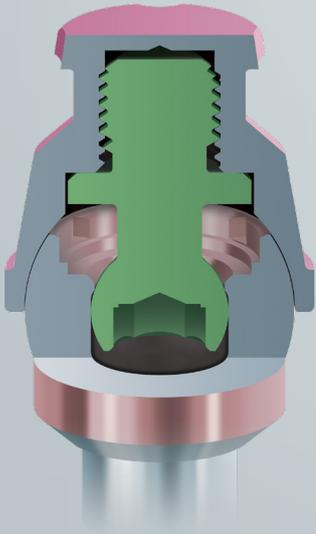

UN CLIC EN TOUTE SÉCURITÉ

Ce système de rétention révolutionnaire et breveté, fonctionne comme un système dans une rotule, ce qui confère au boîtier une liberté de mouvement et garantit sa position en toute sécurité. Lorsque c'est en place, le patient ne peut plus l'enlever et seul le praticien peut le faire lors des visites de contrôle.




Denture Attachment Housing pivots 20 degrees in any direction allowing for the Housing to be positioned into the ideal location for the prosthesis.

UN RATTRAPAGE D'AXE ET UNE PASSIVITÉ TOTALE


- Le pilier locator FTX a des caractéristiques uniques et sa géométrie coronaire sphérique permet à un boîtier de pivoter dans toutes les directions et ce jusqu'à 40 degrés de convergence ou de divergence entre deux implants. Cela évite d'utiliser des piliers angulés.
- Les procédures de mise en place au fauteuil de la prothèse terminée garantit une passivité totale.

UN SYSTÈME DE RETRAIT DE LA PROTHÈSE "RÉVOLUTIONNAIRE"


Le retrait de la prothèse sur locator FTX est rapide et facile grâce à des petites pompes hydroliques qui retirent la prothèse.

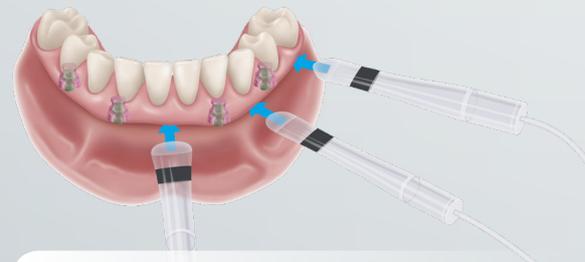

1. Placer les boosters entre la prothèse et la gencive

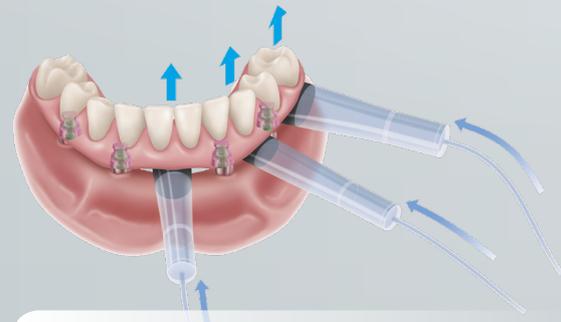

2. Remplir les boosters d'eau pour créer une pression hydrolique

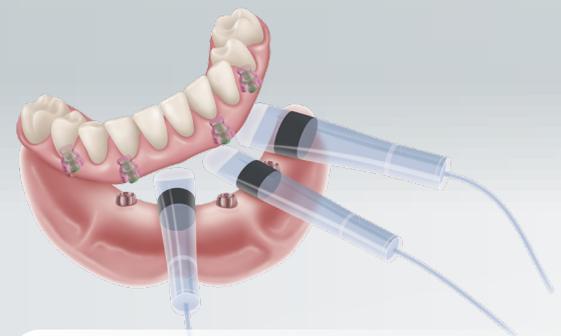

3. La prothèse est retirée

FIXÉ SANS FAIRE DE COMPROMIS.



LE BOÎTIER DE L'ATTACHEMENT FTX

- La partie interne du boîtier contient un filetage dans lequel vient se visser une sphère en PEEK, permettant ainsi de se clipper dans le pilier locator FTX.
- La couleur rose du boîtier anodisé améliore l'esthétique
- Les rainures et le méplat au sommet du boîtier empêchent au boîtier de bouger verticalement ou de tourner sur lui même.
- Le boîtier est passivé grâce aux techniques de solidarisation au fauteuil.



LES GAINES DE RÉTENTION EN PEEK

- Les sphères de rétention en PEEK existent en faible, moyenne et forte rétention. À utiliser selon les besoins du cas.
- Une sphère de travail noire est utilisée et installée d'office dans le boîtier. Dans le kit est fourni une gaine de travail supplémentaire pour les provisoires ou les phases de laboratoire.



LOW



MEDIUM



HIGH



PROCESSING

PACKAGING "TOUT EN 1"

- Le packaging stérile du locator FTX contient l'ensemble des pièces dont vous avez besoin. Conditionné dans un tube, dans lequel figure d'un côté le pilier et de l'autre le boîtier et ses différentes gaines de rétention (bleu-**faible**, blanche-**médium**, verte-**forte**).



PILIERS

- La géométrie unique et sphérique des piliers permet de rattraper 40 degrés de divergence ou de convergence entre deux implants mais aussi de pivoter dans tous les sens.
- Le traitement de surface en DURATEC améliore la résistance du pilier sans compromettre le confort du patient au niveau de la gencive.



LOCATOR F-Tx™

FIXED ATTACHMENT SYSTEM

Pour en savoir plus à propos de la simplicité,
du gain de temps et de l'unique "snap-in" du
nouveau LOCATOR F-Tx, visitez notre site :
www.zestdent.com/ftx

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**
ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

2875 Loker Avenue East
Carlsbad, CA 92010 USA
www.zestdent.com

Toll Free: 1.800.262.2310
Direct: 1.442.244.4835
Fax: 760.743.7975
Email: sales@zestdent.com

DISTRIBUTEUR :



SODIMED - Distributeur Exclusif de ZEST DENTAL SOLUTIONS
187 Rue Jean Dausset
Immeuble Le Séraphin
84916 Avignon

Tél : 04.90.85.29.00
www.sodimed.com