



LOCATOR R-Tx™  
REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM



BETTER.  
SIMPLER.  
STRONGER.

Découvrez la seconde Génération LOCATOR®:  
LOCATOR R-Tx™ Système pour overdenture  
sur implants




SODIMED  
ATTACHEMENTS DENTAIRES  
The Specialist since 1979  
Distributeur Exclusif en France



ZEST  
ANCHORS

# LOCATOR R-Tx™

Nous découvrons la seconde génération pour overdenture du leader mondial d'attachelements.

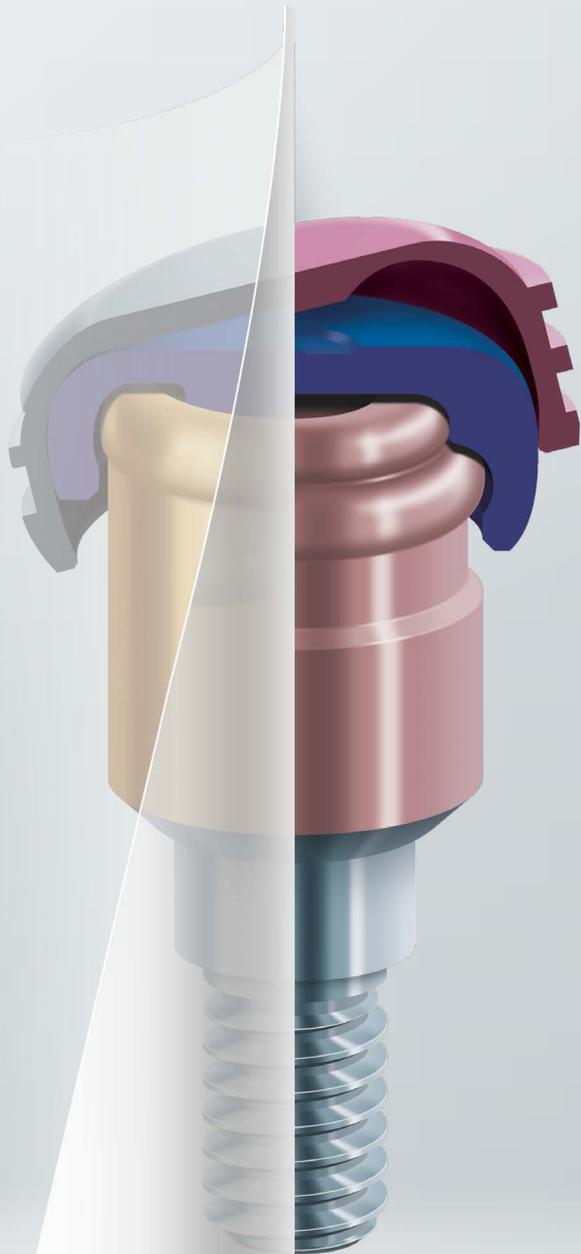

Un meilleur système, plus simple, plus solide mais basé sur la même technique que le Locator actuel.

ZEST Anchors, nous sommes fiers de vous apporter 40 ans d'expérience dans le domaine de l'overdenture.

Depuis plus de dix ans, l'attachelement LOCATOR n'a fait que croître et s'est imposé de façon indiscutable comme leader sur le marché de l'overdenture sur implants.

Récommandé par les marques d'implants, la communauté de praticiens, mais aussi les patients. En gardant notre esprit d'innovation, ZEST a continué à innover et à repenser le LOCATOR.

Nous avons commencé à vous écouter, puis les spécialistes influents mais aussi les fabricants. A partir de là, nos ingénieurs ont commencé à travailler jusqu'à la réalisation concrète du produit.

**Welcome to LOCATOR R-Tx.**



# ÉVOLUTION DU DESIGN ET DE SES PRINCIPAUX ATOUTS.




DuraTec™ Titanium Carbon Nitride Coating est un revêtement esthétique, plus dur, et plus résistant.



Vissage standard .050"/1.25mm\* tournevis hexagonal.



Double rétention au niveau de l'insertion et plus petite géométrie afin de faciliter la stabilité de la prothèse totale.

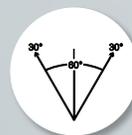

50% de pivot en plus et rattrapage de 60° entre deux implants.




Packaging tout en 1.




Géométrie du boîtier améliorée pour résister aux mouvements et anodisation rose pour gagner en esthétique.



REGARDER LA VIDÉO  
Scanner le QR Code pour voir  
LOCATOR R-Tx™.

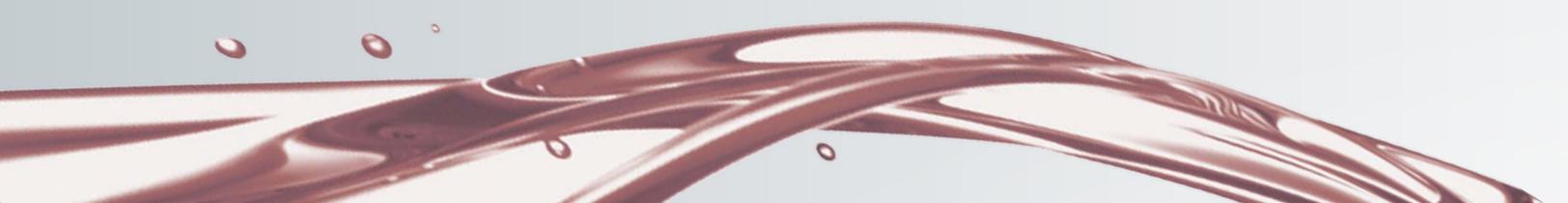

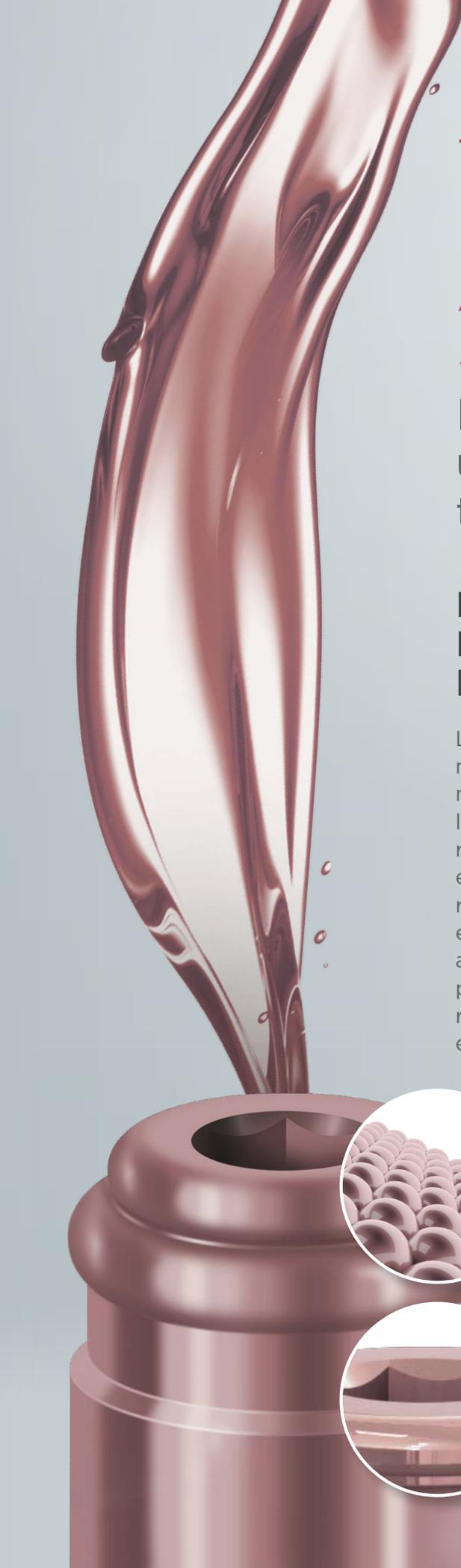


# THE LOCATOR R-Tx™ REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM

Il combine à la fois la simplicité, un nouveau design et un traitement de surface amélioré.


Nous vous présentons DuraTec™ :  
Le nouveau reflet de la force et de  
l'innovation Locator.

Lorsque la force rencontre la fonction et qu'il donne naissance au nouveau LOCATOR R-Tx™. Composé de multiples couches de Titanium nitruré chargé en carbone, le brevet déposé par Duratec donne plus de dureté et de résistance à la surface du pilier. En fait, il est 30% plus dur et améliore de 25% la résistance tout en réduisant de 65% la rugosité en surface. Ces données sont comparées au produit existant ZEST déjà utilisateur de nitrure de titane. Une force accrue complétée par un esthétique amélioré sont suffisants pour donner satisfaction au patient. Cette combinaison révolutionnaire est unique et non présente sur le marché actuel.

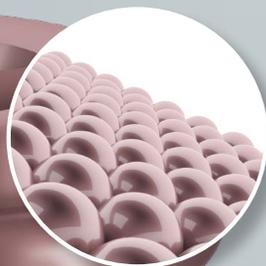


## LA SCIENCE DERRIÈRE DURATEC

DURATEC est composé de multiples couches de titane et de carbone nitruré améliorant ainsi la force, la résistance et diminue la rugosité.

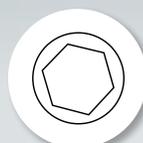

## LE NOUVEL AXE DE VISSAGE


Tournevis standard .050"/1.25mm\*  
Placement aisé, cavité étroite,  
pas de résidu alimentaire et aucun  
dépôt de tartre.

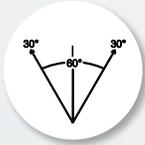


## 1 UNE MEILLEURE STABILITÉ DE LA PROTHÈSE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PIVOTANTE

Le succès du LOCATOR a été que les gaines de rétention en nylon pivotent dans le boîtier de l'attache, donnant ainsi une résilience au système et une excellente stabilité de la prothèse sans pour autant détériorer les composants même en cas de divergence ou convergence des implants.


Les modifications ayant fait l'objet d'un brevet, autorisent les inserts en nylon du LOCATOR R-Tx à pivoter à 30° voire à 60° entre des implants convergents ou divergents et éliminants ainsi l'utilisation d'un pilier angulé.

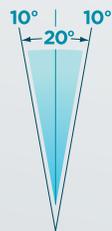

Legacy LOCATOR/  
Standard Retention  
Insert

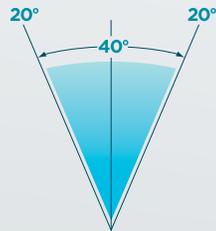

Legacy LOCATOR/  
Extended Range  
Retention Insert

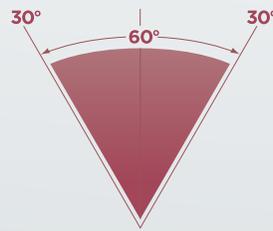


LOCATOR R-Tx  
Retention Insert



## 2 UNE GÉOMETRIE CORONAIRE DE FAIBLE DIMENSION

La double géométrie du pilier offre un angle d'attaque optimum et une conicité donnant ainsi plus de facilité au patient pour aligner et insérer son overdenture.

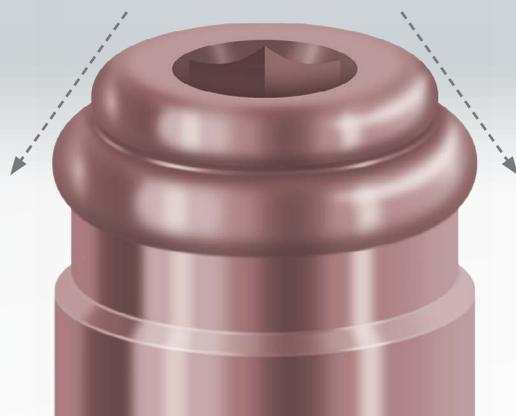

### 3 UN BOITIER D'ATTACHEMENT REPENSÉ

Les rainures horizontales et plates du boîtier permettent de résister aux mouvements verticaux et rotationnels. De plus, l'espace entre le sommet du boîtier et la gaine permettent d'accroître la fonction pivotante. L'anodisation en rose permet d'améliorer l'esthétique surtout lorsque l'épaisseur de la résine est faible.



### 4 L'EFFICACITE DU PILIER

Les inserts de rétention en Nylon disposent maintenant d'un double engagement compte tenu de la construction du nouveau pilier. L'absence de concavité interne permet d'éviter que la plaque dentaire ou que de la nourriture s'y déposent. La stabilité de la prothèse en sera améliorée.

### 5 NOUVEAU DESIGN DES GAINES DE RETENTION

Un double engagement dans les gaines en nylon est prévu pour s'adapter au pilier mais aussi pour éviter toute déformation. Le système a été pensé pour être plus simple, efficace et classé selon des niveaux de rétention : Zéro, Low, Médium, High.



ZERO



LOW



MEDIUM



HIGH



### UN PACKAGING ALL IN ONE


Le design du packaging est monobloc et deux ouvertures de part et d'autre sont possible pour dissocier le pilier des parties prothétiques. Chaque packaging contient un numéro de lot et permet de réaliser un cas de prothèse.



### OUTIL D'INSERTION

Un outil à double sens a été conçu afin de pouvoir enlever et remettre les gaines de LOCATOR RTX facilement. Le praticien peut désengager le mandrin sans risque de déchirer ses gants de chirurgie.

Metal Slot Feature

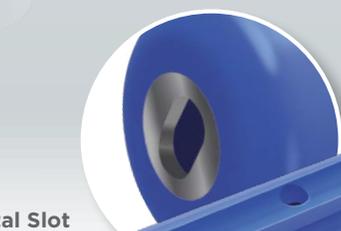

Dual Sided Tool

Remove

Insert



Tout y est dans le LOCATOR R-Tx pour obtenir une meilleure satisfaction du patient, simplifier l'utilisation du produit et avoir une plus grande assurance.

Chez ZEST Anchors, c'est notre mission d'améliorer et d'innover sans cesse la technologie de la prothèse. Le Locator R-Tx représente la future génération de l'attachement dentaire à importance mondiale.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez la nouvelle conception et fonctionnalité de ce système Locator R-Tx, et que vous aurez plaisir de l'utiliser à la place du Locator original. Vos patients profiteront aussi du côté esthétique et d'une utilisation agréable.

Nous restons engagés à développer les techniques de la prothèse dentaire et à assister à des cas cliniques à travers le monde. En travaillant ensemble, nous pouvons aider à améliorer la vie de chacun. Et offrir aux patients le confort pour manger et l'envie de sourire à nouveau.

Venez découvrir le LOCATOR R-Tx en 3D :

[www.zestlocator.com/rtx](http://www.zestlocator.com/rtx)



## LEGACY LOCATOR® COMPARÉ AU NEW LOCATOR R-Tx™

### FEATURES



<b>Revêtement</b>	DuraTec™ Titanium Carbon Nitride. Couleur Rose pour plus d'esthétique et meilleure résistance à l'usure.	Nitru de Titane (gold colored).
<b>Mécanisme de serrage</b>	Tournevis Hex .050"/1.25mm*.	Outil 3 en 1.
<b>Stabilité pour le patient</b>	Dimension coronaire plus petite pour améliorer l'alignement et la stabilité de la prothèse.	Dimension coronaire plus large et difficulté pour le patient pour trouver la position adéquate.
<b>L'insertion de l'attachement</b>	Double rétention et engagement avec le set de gaines.	Double rétention et engagement avec les gaines en nylon standard mais aussi avec les gaines pour fortes divergences.
<b>Rattrapage d'angle</b>	Maximum 30° par implant.	Maximum 20° par implant avec les gaines forte divergence ; 10° avec les gaines standards.
<b>Boitier</b>	Titanium anodisé (Rose) pour l'esthétique, rainures pour résister aux forces verticales et horizontales, améliore la fonction pivotante.	Titanium avec des rainures horizontales pour résister aux forces verticales.
<b>Inserts en Nylon</b>	Seulement un set de gaines : simplification des niveaux de rétention (zero, low, medium, high); amélioration du design afin d'éviter toute déformation.	Gaines standard et forte divergence vendues séparément et dont le niveau de rétention est exprimé en pounds.
<b>Packaging</b>	Packaging "All in one" - tout en 1.	Composants vendus dans un packaging différent.



DISTRIBUÉ PAR :



SODIMED - Distributeur Exclusif de ZEST ANCHORS  
187 Rue Jean Dausset  
Immeuble Le Séraphin  
84916 Avignon

Tél : 04.90.85.29.00  
[www.sodimed.com](http://www.sodimed.com)

\*EXCLUDING CONNECTIONS THAT UTILIZE .048" HEX DRIVE MECHANISM. PLEASE CONTACT YOUR IMPLANT COMPANY PROVIDER FOR MORE INFORMATION.