

**SODIMED PRESENTE UN NOUVEL IMPLANT
CONCU UNIQUEMENT POUR OVERDENTURES
LE LODI : Locator® Overdenture Direct Implant**



Donnez à vos patients la liberté de manger, parler et rire de nouveau.

LES PATIENTS NOUS L'ONT DEMANDE, VOUS AUSSI, ZEST ANCHORS VOUS LE DELIVRE

Le LODI : Implant Locator® pour Overdenture


Jusqu'à maintenant, choisir un faible diamètre d'implant signifiait compromettre l'efficacité des attachements et la satisfaction des patients. L'introduction du LODI fabriqué par ZEST ANCHORS représente un grand pas pour les overdentures.

Le LODI est idéal pour les patients édentés totaux ou partiels qui présentent de fortes résorptions et de faibles crêtes. Le plan de traitement typique pour ces édentés serait de faire une greffe d'os, de suivre un long process et des dépenses importantes. Pour ces raisons, les patients refusent ce plan de traitement. **Maintenant, nous pouvons offrir une solution viable et économique.**

Une petite plateforme implantaire couplée au LOCATOR®, le LODI, est moins invasive, plus prévisible et durable dans le temps. ZEST a répondu aux attentes des praticiens et des patients qui recherchaient une solution non onéreuse et dont les techniques sont abouties.

Le LODI en 5 points :


- ➔ *Un traitement alternatif pour les patients qui refusent les greffes osseuses et dont les moyens financiers sont restreints*
- ➔ *Une solution plus performante que les mini implants O-Ball*
- ➔ *Simple, une instrumentation intuitive et une technique invasive allégée*
- ➔ *Un système complet utilisant le meilleur attachement du marché*
- ➔ *Une augmentation probable de votre activité*

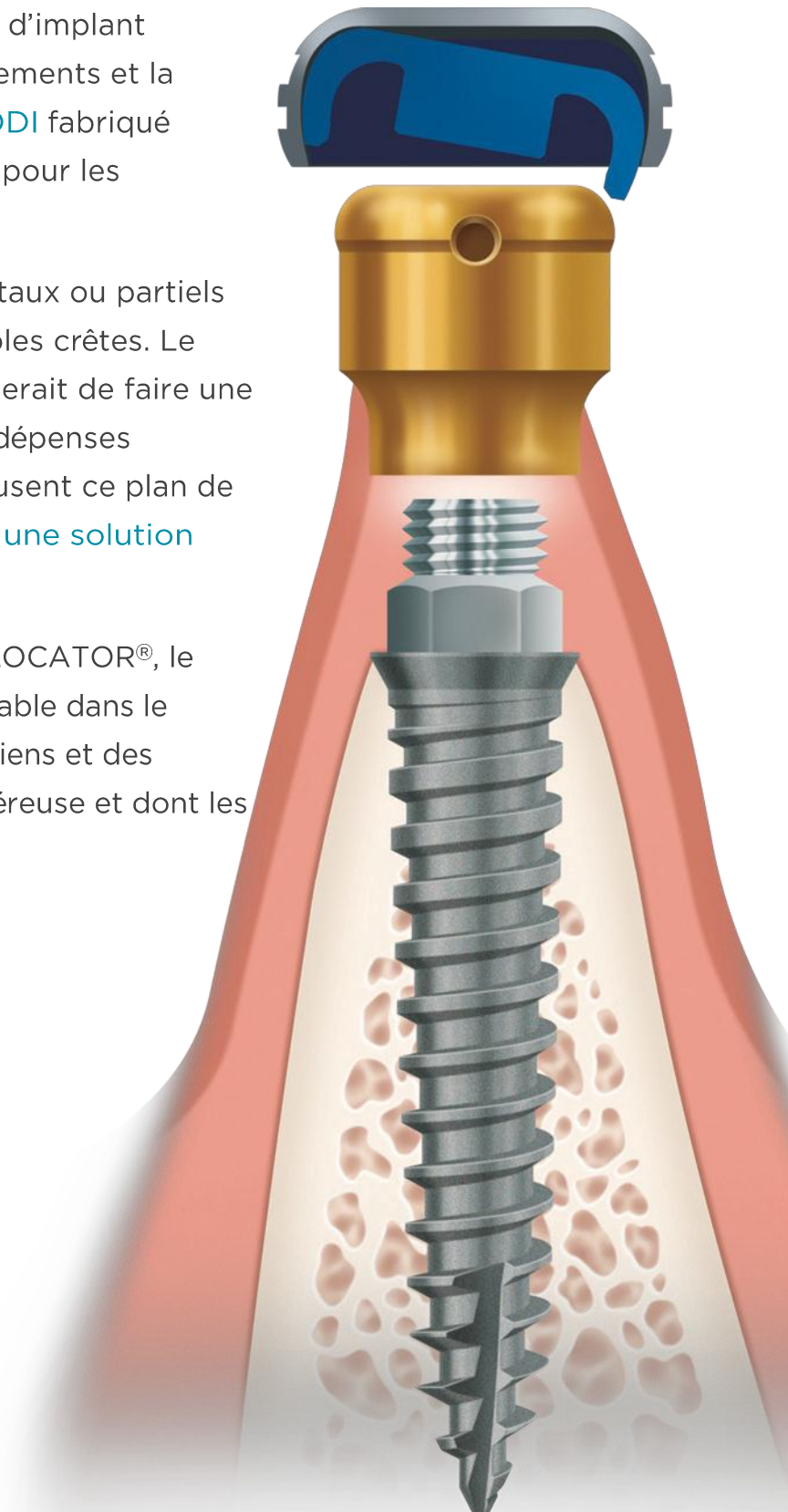

L'IMPLANT LOCATOR MOINS INVASIF, OPTION ECONOMIQUE

UNE ALTERNATIVE AUX MINI IMPLANTS O-BALL

La hauteur verticale est largement réduite et le confort du patient est amélioré lorsque la prothèse est retirée
- augmentation de la tenue de la prothèse.

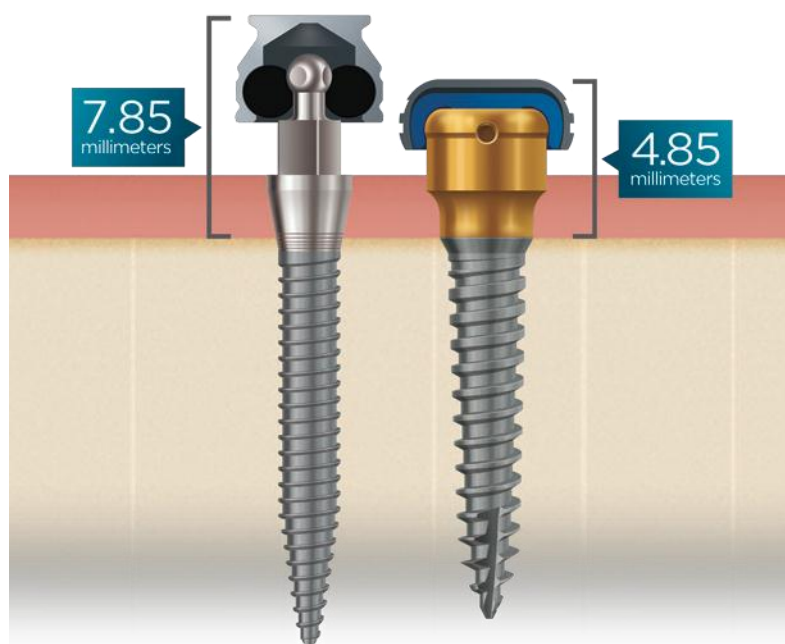

O-Ball Mini
Implant

LODI

1

L'attachement LOCATOR® réduit largement la hauteur et améliore le confort du patient lors de la désinsertion de la prothèse.
Meilleure tenue que les attachements O-Balls.

2

Le design des spires élargies permet d'améliorer la mise en charge immédiate si le cas le nécessite.

3

L'état de surface est mordancé sur toute la longueur de l'implant.

4

Le design de l'apex de l'implant favorise l'insertion et augmente la stabilité.

O-BALL MINI IMPLANT	Comparatif	LODI
7.85mm	HAUTEUR AVEC LE BOITIER	4.85mm
10° ou moins	RATTRAPAGE DE DIVERGENCE	40° entre deux implants
La tenue des O-rings est faible et les caoutchoucs doivent être changés souvent	TENUE	Longue durabilité des nylons (boitier pivotant)
Un seul degré de rétention	NIVEAUX DE RETENTIONS	Plusieurs niveaux (0-5lbs)
Impossible à remplacer	REMPLACEMENT	L'attachement LOCATOR peut être remplacé, si besoin
Pas de hauteur transgingivale possible	HAUTEURS TRANSGINGIVALES	2 hauteurs : 2.5mm or 4mm
Titanium grade	MATERIAU	Titane le plus dur possible

POUR OVERDENTURE POUR LES PATIENTS A FAIBLES CRETES

NARROW DIAMETER IMPLANT : PLATEFORME IMPLANT NARROW (NP) INCLUANT LE LOCATOR, LE MEILLEUR ATTACHEMENT AU MONDE POUR LES OVERDENTURES

5

Les gaines de LOCATOR® pivotent et s'alignent automatiquement dans le boîtier. Une connexion résiliente permet de soutenir les forces masticatoires et de maintenir les gaines durablement.

6

Les hauteurs trans gingivales LOCATOR® disponibles sont de 2,5 mm ou de 4 mm. L'interchangeabilité est intéressante en cas d'usure de l'attachement.


7

Les diamètres disponibles sont 2.4 et 2.9 mm et les hauteurs sont 10,12 ou 14 mm.

Le PACKAGE contient :

- 1 Implant
- 1 Attachement LOCATOR®
- 1 Kit prothétique

Chaque Kit prothétique comprend des gaines de rétention différentes (non divergentes et divergentes).

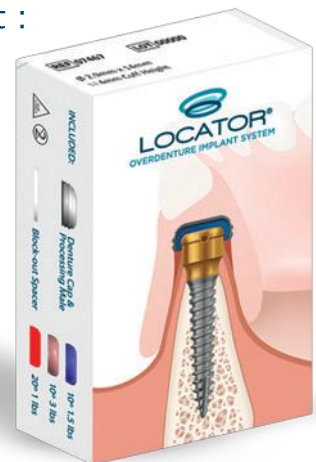


2.4mm

2.9mm



LODI Pack
Taritement
mâle

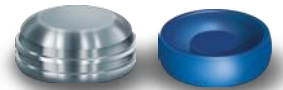

Bouchon

Bleu
1.5lbs




Rose
3lbs

Rouge
1lbs

UNE INSTRUMENTATION INTUITIVE ET SÉCURISÉE

Une trousse chirurgicale simple, didactique et intuitive où les forets sont facilement identifiables. Un marquage laser sur les forets permet une bonne visualisation de la profondeur. Ce système vous aide à préparer correctement votre ostéotomie et à pratiquer aisément la technique Flapless.

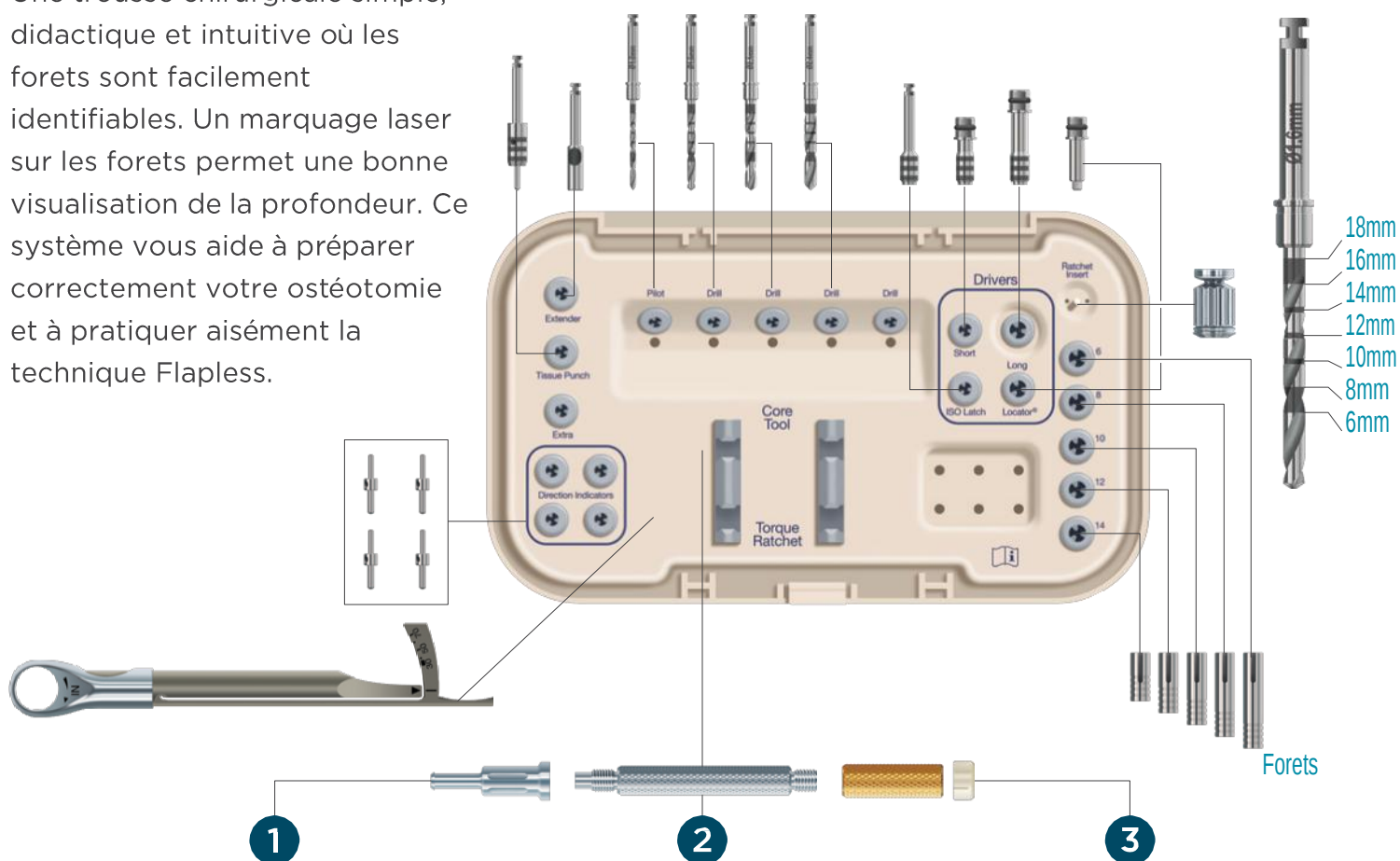


RETRAIT DE LA
GAINÉ

INSERTION
DE LA
GAINÉ

PLACEMENT DE
L'ATTACHEMENT
SUR L'IMPLANT

Une séquence de forage simple pour tous les types d'os
Technique Flapless pour implant 2.4 mm X 12mm

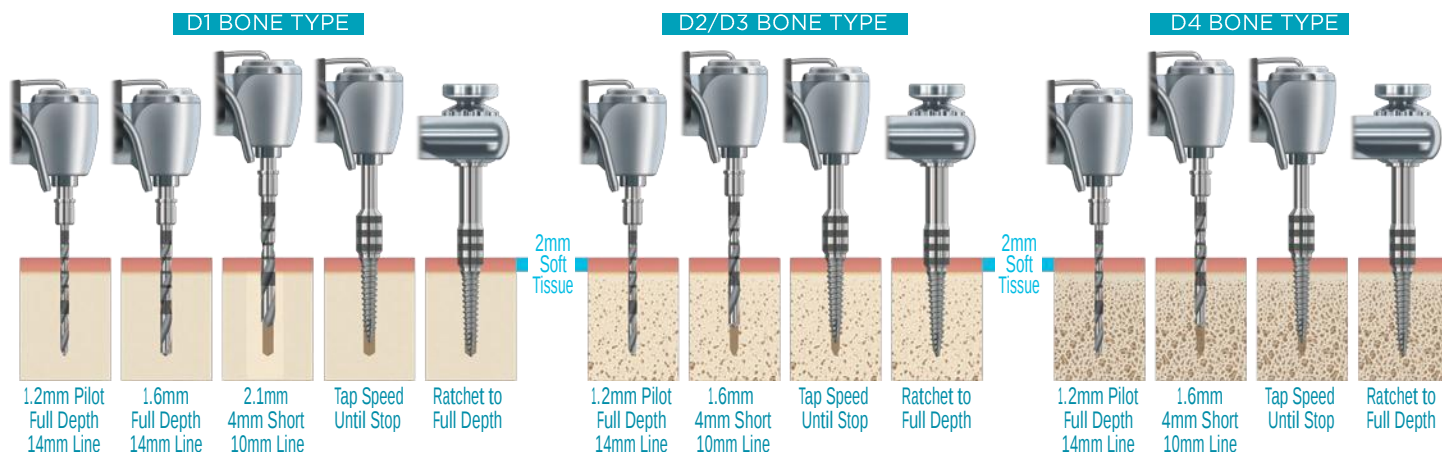

UN DIAMETRE D'IMPLANT ETROIT COUPLE A LA TECHNOLOGIE DE LOCATOR

Facile à insérer et à enlever par vos clients, L'attachement LOCATOR® se différencie par sa technologie brevetée pivotante. Cette capacité innovante de pivoter augmente la résilience et résiste aux plus fortes forces masticatoires. La forme profilée crée moins de problèmes, augmente la productivité et la satisfaction du patient à long terme.

- *Le profil facilite l'insertion et la désinsertion de la prothèse*
- *Possibilité de customiser le niveau de rétention*
- *Rattraper jusqu'à 40° entre deux implants*
- *Faible profil vertical*
- *Bonne résilience et excellente durabilité*

UNE TECHNOLOGIE PIVOTANTE RÉCOMPENSÉE


Les gaines LOCATOR® pivotent dans le boîtier grâce à une véritable connexion résiliente de la prothèse sans aucune perte de rétention. La gaine mâle reste statique dans la cavité femelle, pendant que le boîtier suit le mouvement rotationnel autour du mâle. Cette action pivotante s'accommode des mouvements naturels de l'occlusion, fournissant de ce fait plus de résilience et prévient la désinsertion.

Les attachements ne pivotent pas, ce qui permet d'avoir un excellent blocage de la prothèse. Lorsque le patient mâche, l'attachement peut facilement se déboîter du fait des forces opposées de l'occlusion. Avec le LOCATOR®, la technologie pivotante fournit au patient un confort inégalé lors de la mastication et une confiance accrue.


DIFFERENTES FORCES DE RETENTION ET DE NOMBREUSES OPTIONS DE CORRECTION D'AXE

Les gaines mâles LOCATOR® (non divergentes) et (divergentes) offrent de multiples niveaux de rétention (0 à 5lbs), vous autorisant à sélectionner la meilleure solution, en fonction de la divergence des implants et de la fonction masticatoire du patient. A contrario, le système O-Ball mini implant n'a qu'une seule force de rétention et ne corrige pas la divergence des implants. Les limites de ce profil d'attachement peuvent compromettre la prothèse.

GAINES LOCATOR De 0° à 20° entre deux implants.

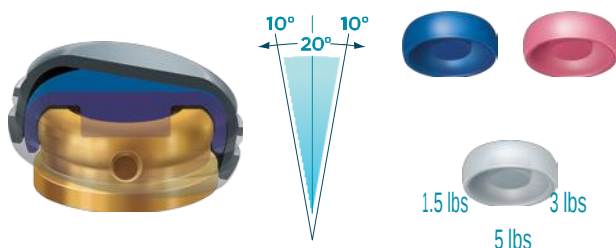

GAINES LOCATOR FORTES DIVERGENCES De 20° à 40° entre deux implants

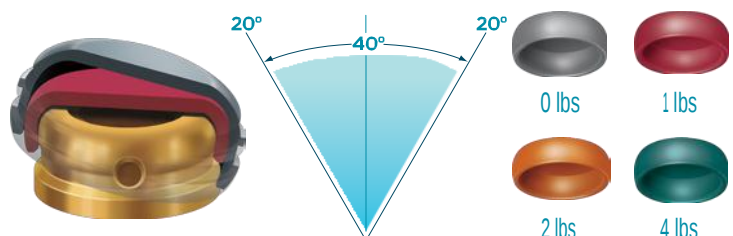

LOCATOR®
OVERDENTURE DIRECT IMPLANT



PROPOSEZ LE LODI
A VOS PATIENTS RETICENTS
AUX GREFFES OSSEUSES !

ZEST ANCHORS
2061 WINERIDGE
PLACE ESCONDIDO,
CA 92029 USA

TEL: 1.855.868.LODI
(5634) FAX :
760.743.7975
EMAIL:
SALES@ZESTANCHORS.COM
WWW.ZESTANCHORS.COM

Importateur exclusif France : <http://www.sodimed.com>

